

# ERP Analysis Viewer




ERP波形解析ソフトウェアは、誘発マルチビューワプログラム(EP Multi Viewer System)とERP再加算解析ツールプログラム(P300/CNV ReAverage Analysis)を組み合わせ、RAW形式で保存された誘発波形データのトリガ単位波形データを読み出して、アーチファクトなどを考慮しながらマニュアルで再加算するツールプログラムです。各トリガ単位データに加算グレード(アーチファクト混入度合い)をつけて、グレードレベルに応じた加算を一気に実行することができます。

加算結果は、EP Multi Viewer にストアすることでマーク機能を行うことができます。また、結果波形をEP Waveのファイル保存することで、EP Multi Viewer で利用することが可能になります。P300/CNV ReAverage Analysis では、最大4グループまでの再加算が可能です。


## 特徴

- 誘発マルチビューワプログラム(EP Multi Viewer System)にERP再加算解析ツールを組み込みます。
- RAW波形ファイルを読み出して、トリガごとの切り出し波形を確認できます。確認時に加算グレードを指定できます。
- 最大4グループの加算が再加算が可能です。(P300再加算時)
- RAW波形を確認しながら加算・リジェクトを指定できます。
- グレードのレベル指定により一気に加算が可能です。
- 加算波形の任意範囲のベースラインを指定できます。
- 加算波形をEP Multi Viewer にストア(転送)して、マーク機能などを利用できます。
- 加算波形をEPW形式で保存し、EP Multi Viewerでの解析に利用できます。
- 加算結果の波形イメージをクリップボードにコピーし汎用アプリケーションで利用できます。
- 加算結果の波形データをテキスト形式でクリップボードにコピーし汎用アプリケーションで利用できます。
- 操作ヘルプが充実しています。


## 画面例

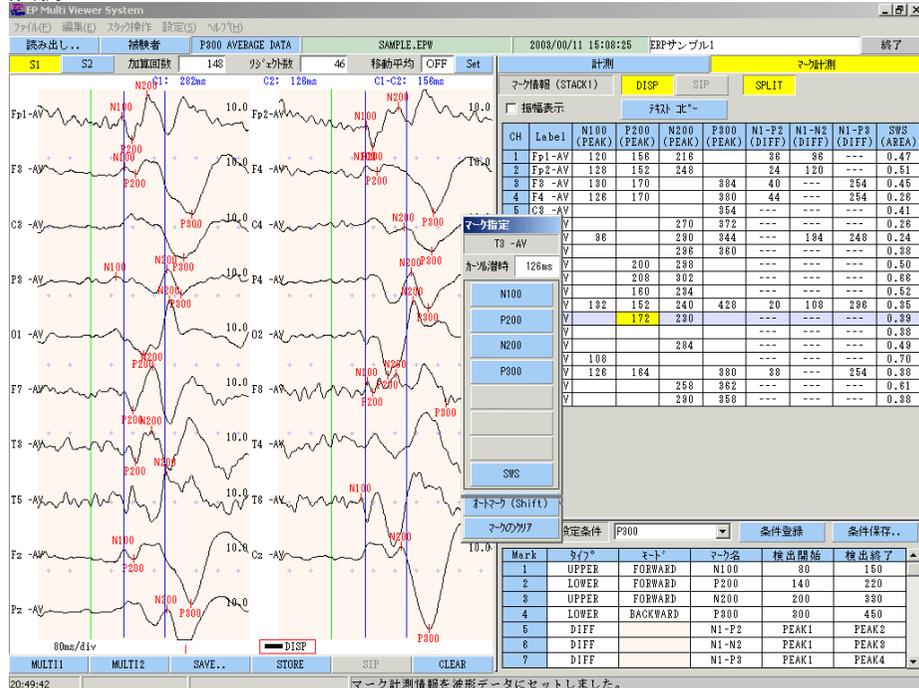

## 画面例 (P300 再加算)

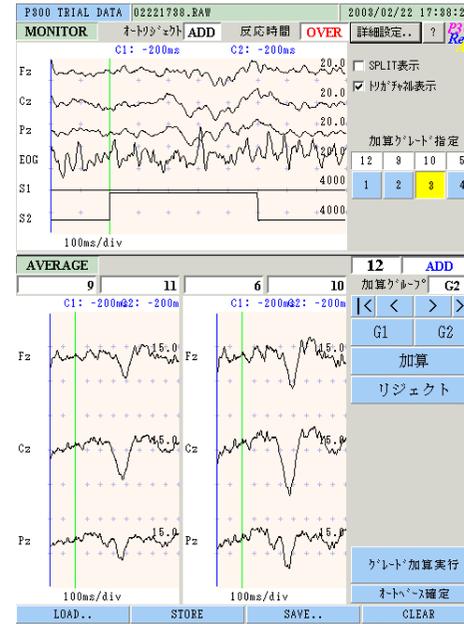

## (CNV 再加算)

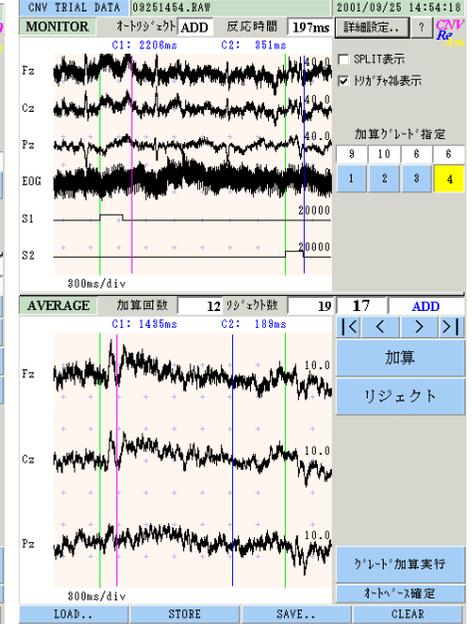

## 仕様 P300 ReAverage Analysis

- 解析チャンネル数 最大64チャンネル
- 読み出しファイル RAWファイル形式(オリジナルフォーマット)
- 解析範囲 読み出したRAW形式ファイルの解析時間に従う
- 加算グループ数 最大4グループ
- 確認機能 RAW波形確認可能、加算のON/OFF再指定可能、加算グループの変更可能
- グレード加算 RAW波形のそれぞれの波形にグレード指定、グレードに応じた再加算が可能
- オートベース機能 加算波形に対して可能(任意区間)
- EP Viewer機能 EP Viewerへのストア機能
- 保存機能 加算波形のEPWファイル保存(EPW拡張子)
- イメージ出力 加算波形イメージのメタファイル形式でのクリップボードコピー
- テキスト出力 加算波形データのテキスト形式でのクリップボードコピー

## 仕様 CNV ReAverage Analysis

- 解析チャンネル数 最大64チャンネル
  - 読み出しファイル RAWファイル形式(オリジナルフォーマット)
  - 解析範囲 読み出したRAW形式ファイルの解析時間に従う
  - 確認機能 RAW波形確認可能、加算のON/OFF再指定可能
  - グレード加算 RAW波形のそれぞれの波形にグレード指定、グレードに応じた再加算が可能
  - オートベース機能 加算波形に対して可能(任意区間)
  - EP Viewer機能 EP Viewerへのストア機能
  - 保存機能 加算波形のEPWファイル保存(EPW拡張子)
  - イメージ出力 加算波形イメージのメタファイル形式でのクリップボードコピー
  - テキスト出力 加算波形データのテキスト形式でのクリップボードコピー
- このソフトウェアは、基礎医学研究用途にご使用ください。

## 動作環境

- ペンティアムIII 800MHz以上のDOS/V機
- メモリ512MB以上 Windows7,8は2GB以上 空きHD容量10GB以上
- XGA(1024x768)以上の解像度
- 動作OS Windows2000, Windows Xp, Windows7, Windows8 (すべて日本語環境)

開発元 (有)のるぷろライトシステムズ 問い合わせメール noru@fb3.so-net.ne.jp  
 〒185-0003 東京都国分寺市戸倉2-11-25 TEL/FAX 042-304-1951 できるだけメールでお問い合わせください。