

収録レビュープログラム (NoruPro Light Systems)

Acquire Review Tool




収録レビュープログラム (**Acquire Review Tool**) は、収録プログラム (**AP Monitor**) でリアルタイム収録中に波形をレビューするためのプログラムです。組み込まれた収録プログラムでは、下段に DualTime の表示も可能になります。プログラムは、収録プログラムにアドインする形で機能を組み込まれて動作します、

特徴

- **AP Monitor** のオプションソフトとして機能します。
- 収録中の波形データのレビューが可能です。
自動でレビュー波形の更新が可能です。
- Dual タイムで Signal 単位で別時間軸で表示が可能です。
- リフィルタリング、表示ゲインの変更が可能です。
オリジナルデータに LFF, HFF, Notch をさらにかけることができます。
- 波形上の任意信号タイプのチャンネルの値をカーソルで読み取ることができます。
- ページ時間変更が可能です。(2sec~5min)
一番見やすい表示ページ時間を選択できます。
- 電極単位で収録されたデータはリモンタージュが可能です。(オプション)
- 操作ヘルプが充実しています。


リアルタイムでの結果表示が可能です。

右側がレビュー画面

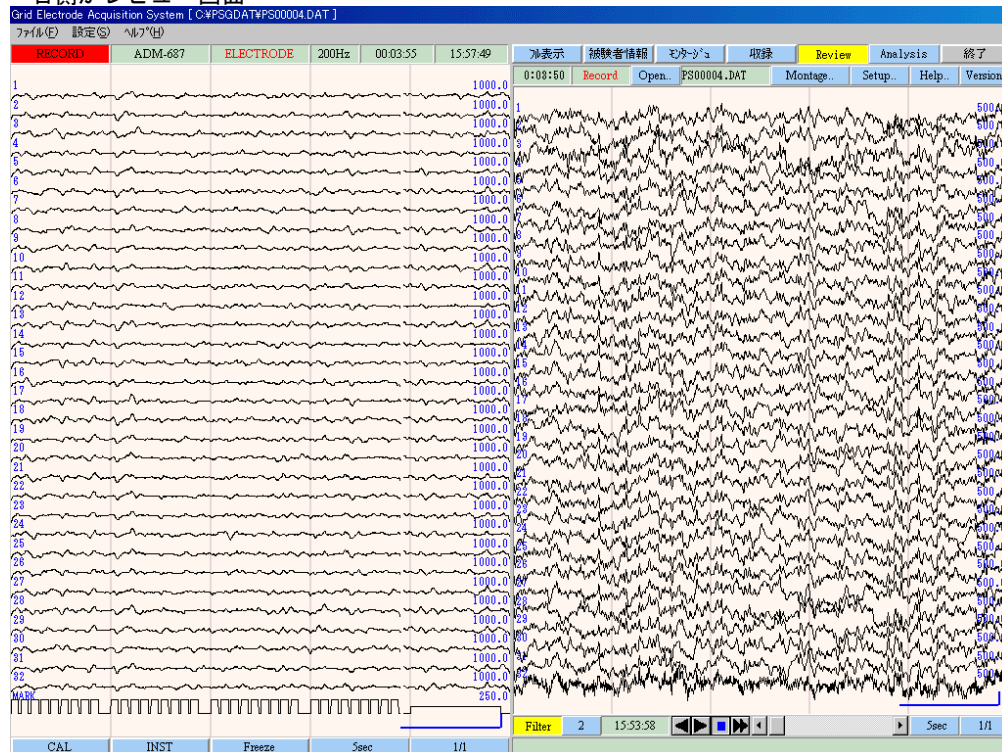

Dual 表示画面 (下部が遅い時間軸)

モニタージュ設定画面 (レビュー用)

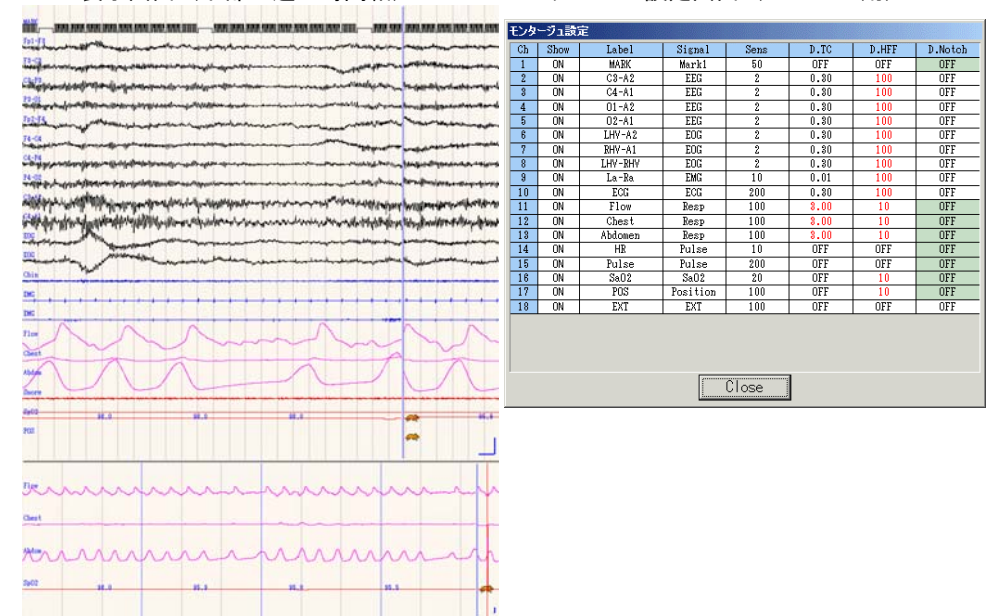

ページコントロールパネル。



仕様

- レビューデータ
 - 表示チャンネル数
 - オート更新機能
 - Dual リアルタイム表示
 - リモンタージュ
 - リフィルタリング
 - 表示ページ時間
 - スケール計測機能
 - イベント表示
- 収録中のデータ (眠学会 PSG 共通フォーマット準拠)
最大 32 チャンネル (収録プログラムによる)
可能
可能、(Signal 単位で指定が可能)
独立してページ時間の指定が可能
可能、(但し電極単位収録時のみ)
可能、(LFF, HFF, Notch フィルター)
2, 5, 10, 20, 30, 60sec, 2, 3, 4, 5min
固定スケール機能、%TIME 計測機能
可能

動作環境

- パーソナルコンピュータ (PC/AT 互換機) Pentium 相当以上
- メモリ 256MB 以上 (推奨 394MB 以上)、ハードディスクの残り容量 1GB 以上
- 表示解像度 1024×768 以上 (解析時には 1280×1024 以上推奨)
- 対応 OS Windows2000, Windows Xp

開発元 (有) のるぷろライトシステムズ 問い合わせメール noru@fb3.so-net.ne.jp
〒185-0003 東京都国分寺市戸倉 2-11-25 TEL/FAX 042-304-1951 できるだけメールでお問い合わせください。